

introducing



DEFINE

by INMODE



MORPHEUS8 | FORMA
DEFINE*cheek* | DEFINE*chin*

*Tratamientos faciales
combinados personalizables*



REDEFINIENDO LOS TRATAMIENTOS FACIALES COMBINADOS PERSONALIZABLES



El efecto zoom, las redes sociales y la cultura de los famosos siguen impulsando la demanda de los pacientes de pómulos esculpidos, mandíbulas marcadas y rasgos faciales más definidos. Los consumidores quieren evitar la cirugía en busca de resultados de un aspecto más natural, por lo que los procedimientos de remodelación facial no quirúrgicos son los mejores tratamientos en su deseo de lograr una apariencia más juvenil sin cicatrices quirúrgicas ni tiempo de inactividad.^{1,2}

Define es la plataforma híbrida definitiva que redefine los procedimientos faciales en consulta. Este dispositivo no quirúrgico de última generación despliega múltiples modalidades programables que se combinan sinérgicamente:

- » **Morpheus8:** microneedling fraccional bipolar
- » **Define Cheek:** RF bipolar hands-free combinada con oscilación para mejillas
- » **Define Chin:** RF bipolar hands-free para la zona submentoniana
- » **Forma:** RF bipolar

La configuración híbrida de Define, con tecnologías hands-free y hands-on, aborda la compleja configuración del rostro y permite realizar tratamientos combinados personalizados en todas las áreas faciales. Con Define, los médicos pueden realizar una variedad de tratamientos combinados específicos y altamente eficaces diseñados para satisfacer todas las demandas de los pacientes con resultados de aspecto natural sin tiempo de inactividad.

1. American Society of Plastic Surgeons, January 2023, Plastic surgery trends for 2023, according to plastic surgeons
2. American Society of Plastic Surgeons, 2018 Plastic Surgery Statistics Report



MORPHEUS8

REMODELADO FRACCIONAL MÍNIMAMENTE INVASIVO

Morpheus8 es un aplicador de RF fraccional mínimamente invasivo para procedimientos dermatológicos y quirúrgicos generales de electrocoagulación y hemostasia. Se trata de una tecnología fraccional clínicamente probada y diseñada para el tratamiento de tejidos. La energía de radiofrecuencia se administra a múltiples profundidades de tratamiento a través de matrices bipolares de microagujas y produce un calentamiento localizado y la coagulación del tejido. La coagulación fraccional promueve la producción de colágeno, mientras que el tejido no tratado entre las agujas favorece una cicatrización más rápida. Morpheus8 dispone de una gama intercambiable de Tips de microagujas con diferentes configuraciones (Prime 12 agujas, Resurfacing 24 agujas y Subdermal 24 agujas), lo que proporciona a los médicos una solución modular.



PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE MORPHEUS8

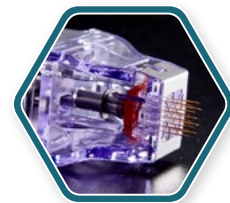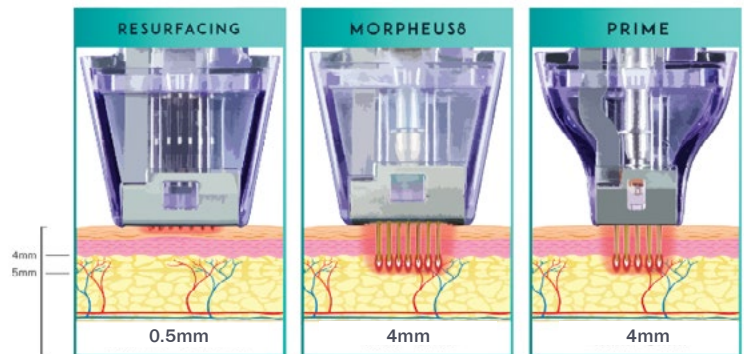

Especificaciones:

	MORPHEUS8	RESURFACING	PRIME
Configuración:	24 Microagujas	24 Microagujas	12 Microagujas
Depth Profile:	1mm - 4mm	0.5mm	1mm - 4mm
Perfil térmico adicional:	+1mm	+0.25mm	+1mm
Profundidad del Tratamiento:	Regulable	Fijada	Regulable

DEFINE *cheek* + DEFINE *chin*

TRATAMIENTO FACIAL HANDS-FREE

Los aplicadores faciales manos libres de Define suministran energía de radiofrecuencia (RF) bipolar en las mejillas, el cuello y la línea de la mandíbula. Gracias a su capacidad para mantener una temperatura constante, Define trata la dermis y el tejido subdérmico, mejorando el aspecto sin cirugía ni tiempo de inactividad. El diseño manos libres y la tecnología programable de Define permiten a su consulta reasignar el tiempo del médico y del clínico a otros pacientes y tratamientos mientras Define está en uso.

Especificaciones:

Nº de electrodos:		Mejilla 24 Mentón 6
Nº de sensores de temperatura		Mejilla 24 Mentón 2
Área de tratamiento:		Mejilla 4.0 cm ² Mentón 1.2 cm ²
Temperatura de corte:		Regulable
Nivel de oscilación:		4.5Hz, 5.0Hz, Pulsed Mode



MEJILLAS



MENTÓN

FORMA

TRATAMIENTO TÉRMICO DE TEJIDOS

Forma es una innovadora tecnología térmica que despliega energía de radiofrecuencia bipolar selectiva en zonas dérmicas y subdérmicas, ofreciendo procedimientos no invasivos y sin dolor. Los termistores de radiofrecuencia de ajuste automático integrados en la pieza de mano fácil de usar leen la temperatura de la piel 1.000 veces/segundo, lo que permite que el tratamiento alcance temperaturas uniformes y óptimas de hasta 43 °C. La monitorización epidérmica inteligente de Forma con retroalimentación continua proporciona a los pacientes tratamientos cómodos, seguros y eficaces.




Especificaciones:

Nº de electrodos:		3
Anchura de los electrodos:		0.4 cm/0.5 cm/0.4 cm
Longitud de los electrodos:		2.0 cm
Distancia entre electrodos:		0.5 cm
Área de tratamiento:		4.5 cm ²
Temperatura de corte:		Regulable hasta 43°C
Frecuencia de salida:		1 MHz





ANTES Y DESPUÉS

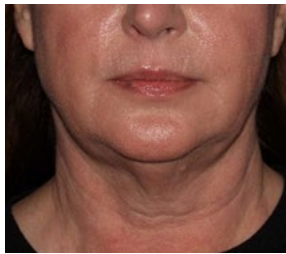

DR. S. CHILUKURI



DR. B. FORLEY

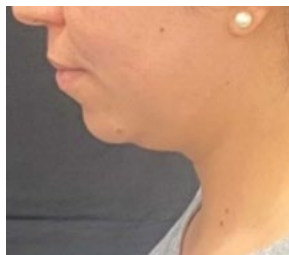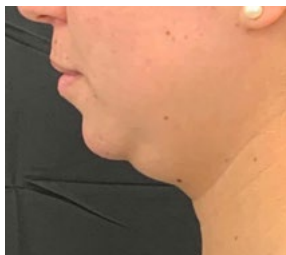

INMODE



DR. G. ELLIS



DR. K. DONNAY



DR. G. STEVENS




DR. K. DONNAY



DR. S. MULHOLLAND



DR. K. DONNAY

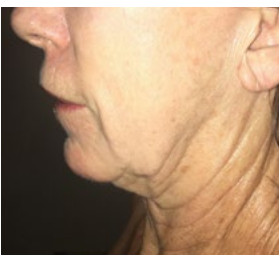

DR. F. ROTH

AUMENTE LA SATISFACCIÓN DE SUS PACIENTES, HAGA CRECER SU NEGOCIO, MAXIMICE LOS INGRESOS DE SU CONSULTA

- » Se prevé que los procedimientos no quirúrgicos sigan siendo populares, ya que los consumidores desean evitar la cirugía en favor de resultados de aspecto natural¹, el 80% de los pacientes optan por procedimientos combinados para obtener resultados más duraderos y minimizar los tiempos de recuperación.²
- » Define amplía su consulta ofreciendo tratamientos faciales combinados para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores. Con Define, puede ofrecer procedimientos personalizados y repetibles que generan un flujo de ingresos recurrentes para maximizar la rentabilidad de la consulta.

1. American Society of Plastic Surgeons, January 2023, Plastic surgery trends for 2023, according to plastic surgeons
2. American Society of Plastic Surgeons, Inaugural ASPS Insights and Trends Report: Cosmetic Surgery 2022



WWW.INMODEMD.ES

VSBDEF0923NF

