

nuevo



BODYTITE

by INMODE



BODYtite | FACE tite | ACCU tite | MORPHEUS8

LIPÓLISIS ASISTIDA POR  
RADIOFRECUENCIA FACIAL Y  
CORPORAL MÍNIMAMENTE INVASIVA

*Resultados quirúrgicos sin cicatrices*

## ACCUTite



**Accutite** es la pieza de mano más pequeña cuya radiofrecuencia ofrece una contracción focalizada en zonas de difícil acceso como cuello, mejillas, zona periorbitaria, pliegue nasolabial y tercio inferior de la cara y cuello con resultados de precisión milimétrica. Accutite cuenta con el reconocimiento científico y de seguridad que avalan el grupo de **tecnologías RFAL**.

### Especificaciones

Longitud de cánula:	6 cm
Diámetro de la cánula:	0,9 mm
Profundidad de tratamiento:	Hasta 10mm, programable
Temperatura interna:	Ajustable, 50-70°C
Temperatura externa:	Ajustable, 35-42°C
Frecuencia de salida:	1 MHz

## FACEtite



**FaceTite** es la solución completa mínimamente invasiva para el rostro y zonas pequeñas del cuerpo. Esta tecnología permite a los médicos conseguir resultados similares a un lifting facial sin cirugía. Los mecanismos de seguridad integrados incluyen mediciones a tiempo real de la temperatura de la piel, monitorización de la impedancia, *cut-off* y una reacción audible para ayudar a garantizar la seguridad del paciente.

### Especificaciones

Longitud de la cánula:	1 Sensor 2 Sensores	10 cm 10 cm
Diámetro de la cánula:	1 Sensor 2 Sensores	1,8 mm 1,3 mm
Profundidad de tratamiento:	Hasta 25 mm	
Temperatura interna:	Ajustable, 50-70°C	
Temperatura externa:	Ajustable, 35-43°C	
Frecuencia de salida:	1 MHz	

## BODYtite



**Bodytite** proporciona una lipólisis superior interna y externa, con resultados que históricamente sólo eran posibles con intervenciones quirúrgicas. Impulsado por la tecnología RFAL (**lipólisis asistida por radiofrecuencia**), BodyTite ofrece una **contracción tridimensional de la dermis, el tejido conectivo subcutáneo y el tejido graso profundo**. Funciona emitiendo calor bipolar rápido y uniforme repartido directamente en la dermis y matriz subcutánea sin barrera epidermal. La radiofrecuencia se transmite entre los dos electrodos aspirando la grasa de forma simultánea y la retracción inmediata de la piel. Sus mecanismos de seguridad instalados, incluyen sensor de medición de la temperatura a tiempo real, la monitorización de la impedancia y su tecnología de corte velan por la seguridad del paciente.

### Especificaciones

Longitud de la cánula:	1 Sensor 2 Sensores	25 cm / 17 cm / 12 cm
Diámetro de la cánula:	1 Sensor 2 Sensores	5 mm / 3,9 mm / 2,5 mm / 2,2 mm /
Profundidad de tratamiento:	Hasta 50 mm	
Temperatura interna:	Ajustable, 50-70°C	
Temperatura externa:	Ajustable, 35-43°C	
Frecuencia de salida:	1 MHz	

# MORPHEUS8

Morpheus8 es una **tecnología fraccionada con profundidad de penetración y nivel de energía programable** para **tratamientos faciales** de arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné y mejorar la textura de la piel y **tratamientos corporales** de celulitis y remodelación subdérmica del tejido adiposo. **Los diferentes tips de Morpheus8** son ideales para zonas específicas en tratamientos de remodelación facial y corporal.

Los diferentes tips de microagujas penetran en el tejido subdérmico, coagulando la grasa y tensando el tejido conectivo. Simultáneamente, la energía de RF genera un calentamiento subnecrótico en la dermis.

Utilizado junto con las piezas de mano RFAL de Inmode, Morpheus8 es perfecto para pacientes que quieren un tratamiento de remodelación facial y corporal mientras se trata las irregularidades superficiales de la piel, con resultados inmediatos y mejoras continuas en el tiempo.

## PRIME

12 pins



## MORPHEUS8

24 pins



## RESURFACING

24 pins



## BODY

40 pins



### Especificaciones

	Prime	Morpheus8	Morpheus8 Resurfacing	Body
Zonas de tratamiento:	Remodelación dérmica y subdérmica de zonas donde se requiere una mayor precisión	Remodelación dérmica y subdérmica de la cara, cuello y cuerpo	Re-epiteliza la capa superficial de la piel	Remodelación dérmica y subdérmica de grandes áreas corporales como abdomen, muslos y glúteos
Nº pins:	12 coated micropins	24 coated micropins	24 coated micropins	40 coated micropins
Longitud del pin:	1-4 mm programable	1-4 mm programable	0,5 mm fijo	2-7 mm programable
Profundidad de tratamiento:	1-4 mm programable	Áreas faciales 2-3 mm Áreas corporales 4 mm	0,5 mm	2-7 mm programable
Profundidad de calentamiento:	Hasta 1 mm de perfil térmico adicional	Hasta 1 mm de perfil térmico adicional	Hasta 0,75 mm de perfil térmico adicional	Hasta 1 mm de perfil térmico adicional

## MORPHEUS8 BODY BURST




### Proceso BURST en 3 pasos:

**CARGA** - Potente explosión de la energía de radiofrecuencia entregada profundamente en la FSN causando la re-orientación de fibras de colágeno

**MODELAR** - La disipación de la energía de radiofrecuencia RF conduce al calentamiento del bloque que resulta en la remodelación del colágeno y el refuerzo de FSN.

**ENTRELAZAR** - La energía de RF entregada a nivel dérmico causa la tracción y la sincronización de fibras en un tejido

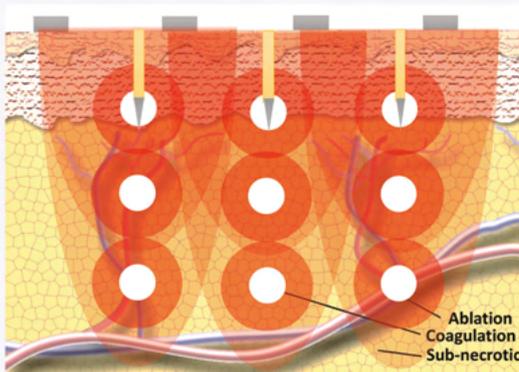

### Morpheus8 Body Burst

#### Configuración multipulso personalizable

#### Especificaciones

Configuraciones	Mult-Level Penetration Cycle
7 mm	7 mm, 5 mm, 3 mm
6 mm	6 mm, 4 mm, 2 mm
5 mm	5 mm, 3 mm
4 mm	4 mm, 2 mm



## 5 RAZONES POR LAS QUE BODYTITE DEBE ESTAR EN SU CONSULTA

### 01 EXCELENCIA CLÍNICA

Respaldado por más de 22 artículos publicados por pares y aprobado por la FDA, BodyTite se configura como la única tecnología médica con doble control de temperatura para tratamientos de remodelación corporal mínimamente invasivos.

### 02 LÍDER EN TECNOLOGÍA

BodyTite utiliza tecnología RFAL - lipólisis asistida por radiofrecuencia y la exclusiva tecnología A.C.E, ambas patentadas por Inmode Aesthetic Solutions.

### 03 RESULTADOS QUIRÚRGICOS SIN CICATRICES

La tecnología RFAL de BodyTite está focalizado en la resección de la grasa y ofrece resultados quirúrgicos sin cicatrices.

### 04 ABORDAJE EXCLUSIVO

Accutite permite alcanzar áreas de la cara y del cuerpo que ningún otro dispositivo del mercado ha logrado alcanzar jamás y ofrecer resultados con una precisión milimétrica.

### 05 RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN

BodyTite es la alternativa definitiva a la liposucción tradicional y complemento ideal de los tratamientos quirúrgicos de alta definición.

## ANTES Y DESPUÉS



DR. C. MIZGALA



DR. P. ROVATTI



DR. T. ROMO



DR. S. MULHOLLAND



DR. D. DUNCAN




DR. G. BLUGERMAN

## RESULTADOS CLÍNICOS

Durante más de dos décadas, Inmode ha revolucionado la industria médico estética con las tecnologías más avanzadas. Inmode tiene más de 50 publicaciones y estudios clínicos publicados y liderando la excelencia clínica.



## Major Beauty Awards 2020

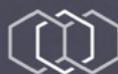

INMODE