

*nuevo*



# CONTOURA

*by* INMODE

INNOVATE  
with INMODE



FORMA

BODY *fx*

FRACTORA

MINI *fx*

---

*Plataforma corporal no invasiva*

# BODYfx


La primera y única tecnología no-invasiva para el tratamientos de remodelación corporal comprobada en artículos y estudios clínicos reales publicados por pares para eliminar de forma permanente la grasa localizada y mejorar la apariencia de la celulitis.

BodyFX es una tecnología innovadora de tercera generación para el remodelado corporal no-invasivo pudiendo tratar gluteos, abdomen, flancos y muslos. BodyFX no sólo trata de forma selectiva zonas problemáticas de tejido graso subcutáneo, sino que su tecnología de radiofrecuencia calienta la superficie de la piel, ayudando al tensado de la zona. Con múltiples publicaciones revisadas por pares, BodyFX es la solución a largo plazo para la eliminación permanente de las células grasas.



## ¿Cómo funciona?

- » La radiofrecuencia genera un calor preciso y óptimo sobre la piel para contraer y moldear el cuerpo.
- » El masaje de vacío produce una suave presión permitiendo el tratamiento a máxima profundidad.
- » Tecnología A.C.E. trabaja conjuntamente con la radiofrecuencia y el masaje de vacío para un tratamiento seguro y efectivo.

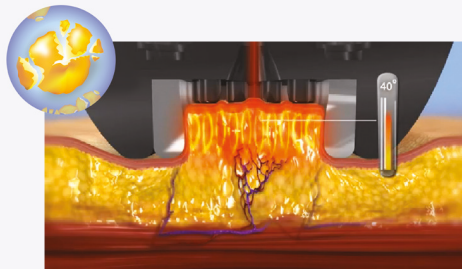

## Estudio de Apoptosis en láser en cirugía y medicina

- Apoptosis en células grasas: 30% de adipocitos, hasta 2,5 cm profundidad de tratamiento, teñido positivo para APAF-1, un marcador validado para apoptosis
- Aumento significativo en síntesis de colágeno (neocolagenesis) representando un aumento medio de 13,7%

## Especificaciones

Tamaño cámara:	5 cm x 2.5 cm
Frecuencia de salida RF:	Hasta 50W
Frecuencia de salida:	1 MHz
Presión negativa:	Hasta 360 mBar
Corte temperatura:	Monitorización y corte de temperatura en tiempo real. Seleccionable por el usuario hasta 43°C.



## PLUS

El primer tratamiento térmico para la piel con ajuste automático para la generación de nuevo colágeno y tensado de la piel.

Plus es una radiofrecuencia bipolar subdérmica no invasiva para la generación de nuevo colágeno y elastina. La radiofrecuencia fluye uniformemente entre los electrodos para ofrecer una experiencia termal cómoda. Los sensores de temperatura incorporados permiten controlar la temperatura clínica, y mantenerla de forma prolongada a temperaturas terapéuticas.

## Especificaciones

Frecuencia de salida RF:	Hasta 65W
Frecuencia de salida:	1 MHz
Corte temperatura:	Medidas de temperatura en tiempo real establecido por usuario hasta 43°

# TECNOLOGÍA A.C.E.

Adquirir. Controlar. Extender. Tecnología para optimizar la energía máxima de forma segura

## » ADQUIRIR

Los termistores de RF inteligentes incorporados en la pieza de mano que leen la temperatura de la piel 1000 veces por segundo para “Adquirir” una contracción terapéutica de la piel sin sobrecalentamiento. Las medidas se muestran en el panel de control, y un indicador acústico avisa al usuario en el caso de cambios críticos en la temperatura y perfil de impedancia en tiempo real.

## » CONTROL

A diferencia de CUALQUIER tecnología térmica para la mejora de la piel a día de hoy, el A.C.E. función “CONTROL” es un software único con un algoritmo que ofrece al medico una seguridad y control sin precedentes gracias a su “CORTE” de temperatura programable entre 35°C y 45°C.

## » EXTENDER

Pruebas clínicas indican que la exposición prolongada a 41°C a 43°C es ventajosa para el tensado de la piel. Con A.C.E., la función “EXTENDER” permite exponer la piel y/o el tejido adiposo a temperaturas clínicamente terapéuticas durante un tiempo prolongado sin el riesgo de incidencias adversas para maximizar los resultados y reducir radicalmente o eliminar no-respondedores.

 OPCIONAL



FORMA®



PLUS®



BODY *fx*®



FRACTORA



MINI *fx*®



## LA SOLUCION DE REMODELADO PARA MAXIMIZAR RESULTADOS

La remodelación corporal es uno de los tratamientos estéticos más populares. En muchas ocasiones, los pacientes quieren moldear su figura sin una intervención quirúrgica. Contoura es la plataforma de remodelación corporal no invasiva ofrece la última tecnología para tratamientos de:



- » Grasa localizada
- » Celulitis
- » Flacidez

Contoura es la ÚNICA plataforma para tratamientos de remodelación corporal no invasiva demostrados en estudios clínicos y artículos revisados para eliminar las células grasas de forma permanente y contraer la piel.



Ofrezca a sus pacientes resultados médicos y fiables.




DR. D. DUNCAN

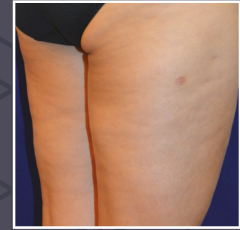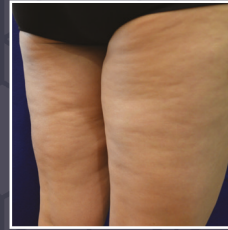

DR. J. DIAMOND

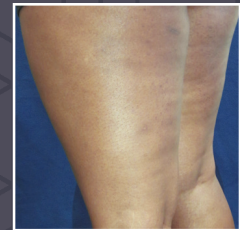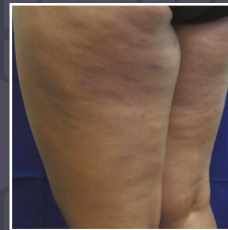

DR. J. DIAMOND

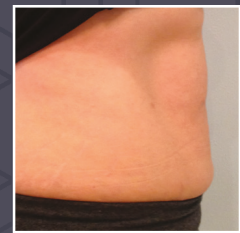

SERENITY CREEK MED SPA



DR. B. RIDENOUR



F. ORMONDE, MA



DR. S. MULHOLLAND

# BENEFICIOS PARA SU CONSULTA

- » A diferencia de otros equipos para tratamientos de remodelación corporal, Contoura no tiene ningún coste de consumibles ni de pulsos.
- » La tecnología de radiofrecuencia ofrece la posibilidad de realizar tratamientos para el tensado facial y corporal, así como de grasa localizada y celulitis en un sólo dispositivo, proporcionando varias fuentes de ingreso en su consulta.



**I N M O D E**

*aesthetic solutions*

[WWW.INMODEMD.COM/ES](http://WWW.INMODEMD.COM/ES)