



# INMODE

## PLATAFORMA OPTIMAS



MORPHEUS | MORPHEUS *body* <sup>3D</sup> | FORMA | PLUS | VASCULAZE  
LUMECCA | BODY *fx* | MINI *fx* | DIOLAZE *xl*

INNOVATE  
with INMODE

**TODOS LOS TRATAMIENTOS  
DE MEDICINA ESTÉTICA EN  
UNA ÚNICA PLATAFORMA**

Inmode, una empresa pionera en el desarrollo de plataformas médicas que combinan tecnología innovadora, exclusiva y patentada para ofrecer a sus pacientes resultados superiores. Rápido, seguro y en tendencia, Inmode es belleza.



# MORPHEUS8 | MORPHEUS8 body

## TECNOLOGÍA FRACCIONADA DE MÁXIMA PROFUNDIDAD

Tratamientos avanzados de rejuvenecimiento facial y corporal mínimamente invasivos que combinan microagujas y radiofrecuencia para estimular la producción de colágeno, retraer la piel y mejorar su textura.

La energía de radiofrecuencia de Morpheus8 se dirige a varias profundidades de la piel. Morpheus8 es un tratamiento mínimamente invasivo, con un mínimo tiempo de recuperación, sin enrojecimiento prolongado ni efectos secundarios.

### BENEFICIOS


- Tecnología fraccionada con profundidad de penetración y nivel de energía programable.
- Diseñado para su uso en tratamientos quirúrgicos, dermatológicos y generales para electrocoagulación y homeostasis.
- Penetración en el tejido adiposo hasta 7 mm con un perfil térmico adicional de hasta 1 mm.
- Calentamiento subnecrótico, coagulación del tejido subdérmico y tensado del tejido conectivo simultáneamente.
- Poco o ningún daño en la dermis.
- Seguro en todos los tipos de piel, con poco riesgo de hiperpigmentación post inflamatoria (PIH).

### TECNOLOGÍA 3D SMART FRAME


La nueva tecnología 3D Smart Frame está diseñada para proporcionar un calentamiento tridimensional masivo de la dermis. Patentado por Inmode, esta tecnología se encuentra disponible en el nuevo tip Morpheus8 Body 3D para tratamientos corporales más seguros. En este nuevo cabezal, la radiofrecuencia bipolar se aplica siguiendo un patrón secuencial que comienza en las microagujas centrales y se expande hacia los anillos medios y externos generando un efecto en 3 dimensiones.



Dr. G. Lask - Suavizado de las arrugas de la cara

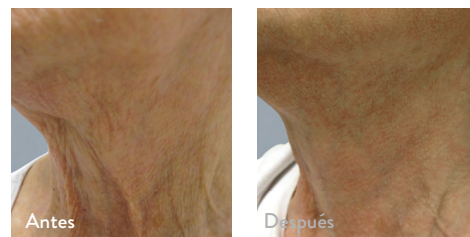

Dr. T. Leob - Importante reducción del descolgamiento del cuello

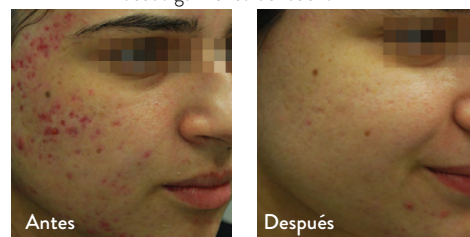

Dr. J. Hellman - Reducción del acné quístico activo y la cicatrización

### ESPECIFICACIONES

	PRIME	MORPHEUS8	MORPHEUS8 RESURFACING	BODY 
<b>Zonas de tratamiento</b>	Remodelación dérmica y subdérmica de zonas donde se requiere una mayor precisión	Remodelación dérmica y subdérmica de la cara, cuello y cuerpo	Re-epiteliza la capa superficial de la piel	Remodelación dérmica y subdérmica de grandes áreas corporales como abdomen, muslos y glúteos
<b>Nº pins</b>	12	24	24	40
<b>Longitud del pin</b>	1 - 4mm programable	1 - 4mm programable	0,5mm fijo	2 - 7mm programable
<b>Profundidad de tratamiento</b>	1 - 4mm programable	Áreas faciales 2-3mm Áreas corporales 4mm	0,5mm	2 - 7mm programable
<b>Profundidad de calentamiento</b>	Hasta 1mm de perfil térmico adicional	Hasta 1mm de perfil térmico adicional	Hasta 0,25mm de perfil térmico adicional	Hasta 1mm de perfil térmico adicional
<b>Modo de trabajo</b>	Fixed y cycle	Fixed y cycle	Fixed	Fixed, cycle y burst




# FORMA & PLUS

## REMODELACIÓN FACIAL Y CORPORAL

El primer tratamiento térmico para la piel con ajuste automático para la generación de nuevo colágeno y tensado de la piel.

Forma y Plus son aplicadores de radiofrecuencia bipolar subdérmica no invasiva para la generación de nuevo colágeno y elastina. La radiofrecuencia fluye uniformemente entre los electrodos para ofrecer una experiencia térmica agradable. La tecnología A.C.E permite controlar la temperatura terapéutica y mantenerla de manera segura para garantizar los resultados. Los termistores incorporados permiten alcanzar temperaturas terapéuticas óptimas con probada eficacia clínica y mantenerla de manera segura para garantizar los resultados.

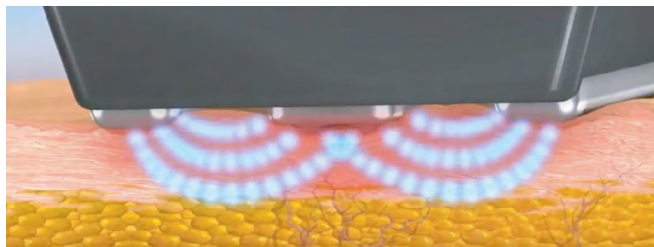

- Calor
- Energía de radiofrecuencia

### BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA A.C.E.

- Adquirir: Los termistores inteligentes de RF incorporados en la pieza de mano, leen la temperatura de la piel a 1000 veces por segundo para tener información a tiempo real.
- Controlar: Seguridad y uniformidad sin precedentes con la temperatura de corte programable, que se enciende y apaga automáticamente.
- Extender: Estudios clínicos muestran que la exposición prolongada a temperaturas de 41 °C - 43 °C es una ventaja para el tensado cutáneo.

# ROI


Sin contadores de pulso o consumibles, los aplicadores Forma y Plus permiten a los médicos concentrarse en perfeccionar los resultados del tratamiento ¡sin tener que controlar su productividad!

### ESPECIFICACIONES


Salida de energía RF:	Hasta 62W
Frecuencia de Salida:	1MHz
Temperatura de corte:	Mediciones de temperatura en tiempo real establecidos por el operador hasta 43 °C




Dr. H. Ohanian - Reducción de la piel arrugada bajo el cuello

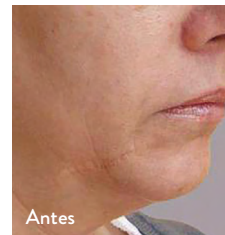


Dr. A. Nelson - Suaviza significativamente y contrae la papada

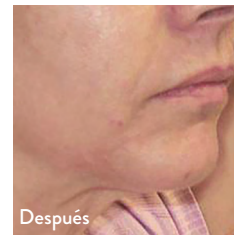

Dr. M. Bayerl - Remodelación corporal no invasiva, segura y eficaz

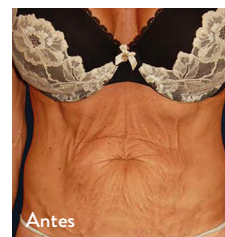

F. Ormonde, ME - Reafirmación de piel flácida y arrugada

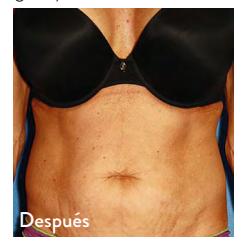



# LUMECCA

## IPL PARA EL REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL


IPL de última generación que emite hasta 3 veces más energía en el rango de 500nm a 600nm, mejorando la efectividad en lesiones pigmentadas y vasculares.

Lumecca permite tratar toda variedad de fototipos de piel, tales como pigmentación facial, telangiectasias, textura y tono de la piel y/o daños provocados por el sol.

### BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA A.C.E.

- Alta eficacia en el tratamiento de lesiones vasculares y pigmentadas gracias a su potencia máxima.
- Reducción del tiempo de tratamiento gracias al tamaño del spot y a la alta frecuencia de repetición del pulso.
- Mejora del confort del paciente (indoloro) y seguridad por el tip de enfriamiento de zafiro.
- Alto ratio de repetición de pulso en todos los parámetros.

### GRÁFICO DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN

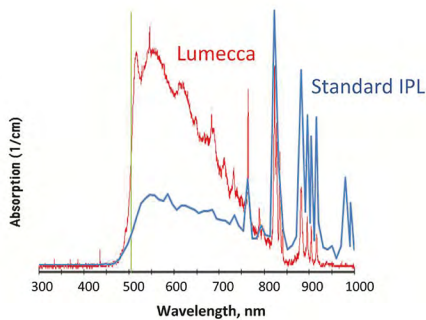

Lumecca trata una amplia gama de protocolos de rejuvenecimiento de la piel con una novedosa lámpara flash de xénon de baja presión con la potencia máxima más alta que produce energía efectiva al 65% de energía en el rango entre 500-650 nm (mientras que los IPL estándares solo emiten el 10-15%).

### ESPECIFICACIONES

<b>Longitud de onda:</b>	515-1200 nm 580-1200 nm
<b>Tamaño del spot:</b>	30 mm x 10 mm
<b>Fluencia:</b>	5-30 J/cm <sup>2</sup>
<b>Duración del pulso:</b>	1.5-15 msec
<b>Guía de enfriamiento:</b>	10-25 °C
<b>Ratio de repetición:</b>	1 pps



Dr. V. Ross - Tratamiento de pecas y manchas de edad en 1 sesión



Dr. M. Taylor - Tratamiento de pecas en 1 sesión




Dr. V. Ross - Reducción de lesiones vasculares



Dr. T. Burke - Eliminación de manchas en las manos



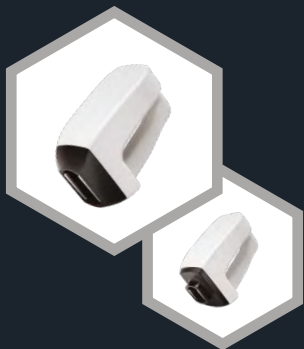


# BODYfx & MINIfx

## TRATAMIENTO DE REMODELACIÓN CORPORAL Y CELULITIS

Solución no invasiva para tratar grasa localizada sin dejar flacidez .

### El tratamiento de BodyFX actúa sobre el tejido graso para conseguir una remodelación corporal no invasiva

- La radiofrecuencia genera un calor preciso y óptimo sobre la piel para contraer y moldear el cuerpo.
- El masaje de vacío produce una suave presión permitiendo el tratamiento a máxima profundidad.
- Los estudios clínicos con histologías muestran la reducción del volumen y la contracción.

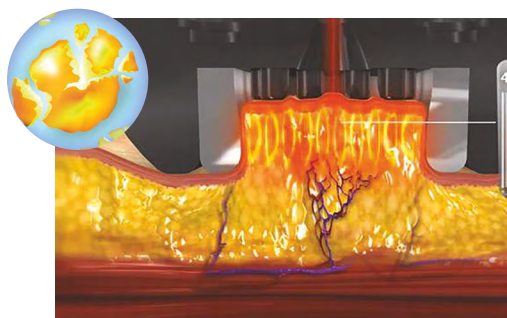

#### Estudio de apoptosis con láser en Cirugía y Medicina

- Apoptosis de las células grasas: 30% de los adipocitos en una zona de tratamiento de 2,5 cm se muestran positivos en APAF-1, un marcador validado para la apoptosis.
- Aumento significativo de la síntesis de colágeno (neocolágeno) que representan un aumento medio del 13,7%

### BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA A.C.E

- Adquirir. Controlar. Extender. Tecnología para optimizar la seguridad con la energía máxima.
- El calentamiento previo del tejido reduce el umbral de la apoptosis selectiva de las células grasas.
- Un sofisticado sistema de control de la temperatura del tejido y de la impedancia alcanza y mantiene la temperatura óptima en los puntos finales para prevenir daños atróficos.
- La monitorización activa de la temperatura y el control con bloqueos para una seguridad sin precedentes, que elimina virtualmente el riesgo de daño térmico.

# ROI


La mayoría de los tratamientos de remodelación corporal se realizan con un único sistema. BodyFX ofrece una remodelación corporal y la muerte celular de los adipocitos en una única aplicación y sin consumibles.

### ESPECIFICACIONES


<b>Presión negativa:</b>	Hasta 500 mbar
<b>Salida de energía de RF:</b>	Hasta 50 W
<b>Frecuencia de salida:</b>	1 MHz
<b>Temperatura de corte:</b>	Control de la temperatura en tiempo real y bloqueo Operador ajustable hasta 43 °C



Dr. S. Mulholland - Significante reducción en el área abdominal

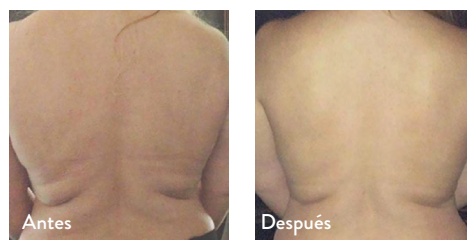

Jannae Beauty Institute - Remodelación del área de la espalda

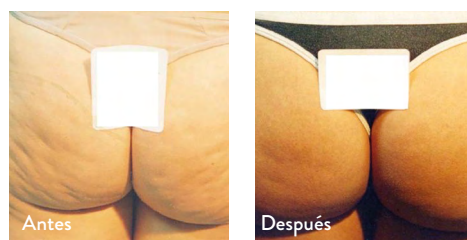

Dr. S. Mulholland - Mejora sustancial de la celulitis



Dr. J. Diamond - Reducción de la apariencia de la celulitis



# DIOLAZE *xl*

## DEPILACIÓN LÁSER

Láser de diodo ultra rápido con triple longitud de onda simultánea.

DiolazeXL es el láser de depilación más rápido del mercado. DiolazeXL combina efectividad y seguridad con máxima potencia y un gran tamaño de spot simultáneamente en la misma sesión.

La tecnología de láser diodo y su potencia proporcionan una combinación única de eficacia y seguridad. Los médicos podrán optimizar sus ingresos por depilación láser.

### ESPECIFICACIONES

Longitud de onda:	810 nm
Fluencia:	5-40 J/cm <sup>2</sup>
Duración de pulso:	corto/largo
Guía de enfriamiento:	5-15 °C
Ratio de repetición:	único y 1pps auto - repetición
Scanner:	Escáner de diodo con pulso

- Longitud de onda, pulso y potencia gold standard para mayor seguridad.
- Reducción del tiempo de tratamiento clínico gracias al tamaño del spot y a la alta frecuencia de repetición del pulso en todos los niveles de energía.
- Mayor potencia de pulso y energía para el tratamiento de incluso el vello residual.
- Virtualmente indoloro, por la tecnología de enfriamiento incorporada.

Potencia máxima y spot de gran tamaño se emiten simultáneamente en la misma sesión.

### LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL GRAN TAMAÑO DEL SPOT (TAMAÑO REAL)



Dr. J. Diamond



# VASCULAZE

## POTENTE LÁSER DE DIODO

Para el tratamiento de lesiones vasculares

VASCULAZE representa la máxima evolución en cuanto al tratamiento de alteraciones o lesiones vasculares para piernas, cara u otras zonas anatómicas. Su pieza de mano ergonómica opera con precisión y simultáneamente produce un rápido enfriamiento por contacto, lo que hace que los tratamientos sean más seguros y cómodos.

Su energía máxima se dirige selectivamente a la hemoglobina. Vasculaze de Inmode está indicado para la coagulación y hemostasia de lesiones vasculares benignas tales como angiomas, lagos venosos, telangiectasias, hemangiomas y arañas vasculares en piernas.

### VENTAJAS

- Tratamiento rápido con una duración de pulso de 5 a 25 ms.
- La longitud de onda de 1064 nm hace que la penetración de energía máxima a una profundidad de 3 a 8 mm (ubicación de la mayoría de las venas reticulares).
- La absorción de hemoglobina es lo suficientemente alta para la fototermólisis selectiva, pero sigue siendo relativamente baja, lo que permite el tratamiento de grandes vasos (la luz penetra profundamente en la sangre, coagulándola a lo largo de la vena).
- La melanina tiene una absorción insignificante en este rango de longitud de onda, lo que permite a los pacientes de piel clara o de piel oscura sean tratados con éxito.



Dr. H. Goren - Disminuye la aparición de microvarices en las piernas



Después



Dr. M. Gold - Tratamiento seguro y eficaz para blanquear arañas vasculares y otras lesiones visibles



Después



Dr. M. Gold - Actúa directamente sobre las deformidades vascular



Después

### COAGULACIÓN Y HEMOSTASIS DE LESIONES VASCULARES BENEFICIOSAS:

- Telangiectasias (> 1 mm)
- Venas reticulares de la pierna (subdérmicas)
- Arañas vasculares
- Hemangiomas
- Parches y lagos venosos
- Hasta 5 mm de profundidad y 4 mm del diámetro del vaso

### ESPECIFICACIONES

Longitud de onda:	1064 nm
Tamaño del punto:	3 mm x 4 mm
Fluidez:	100-300 J/cm <sup>2</sup>
Duración del pulso:	Corto: 2.4-84 ms / largo: 4.8 -168 ms
Tipo de enfriamiento:	Fuerte: 7 ° C) / Normal: 15 ° C
Tasa de repetición:	Individual y 1 pps

INMODE OFRECE LA MÁX EXTENSA GAMA DE APLICACIONES ESTÉTICAS. ANTERIORMENTE, LOS MÉDICOS TENÍAN QUE TENER 3 Ó 4 EQUIPOS PARA PODER REALIZAR DISTINTOS TRATAMIENTOS. INMODE HA DESARROLLADO UNA PLATAFORMA QUE ACOGE TODOS ESTOS TRATAMIENTOS PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD DE SU CONSULTA.

**Dr. Gary Lask**  
Board Certified Dermatologist,  
UCLA



Todos los pacientes re-epitelizaron entre 4 y 7 días después del tratamiento. No había casos de cicatrización retardada, ninguna reacción adversa significativa y, más específicamente, ningún caso de hipopigmentación pos-inflamatoria (PIH), ni cicatrices hipertróficas/ hipotróficas”.

Fractional Ablative Radiofrequency Resurfacing In Asian And Caucasian Skin: A Novel Method For Deep Radiofrequency Fractional Skin Rejuvenation. *Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications.*

La reducción media de la circunferencia fue de 3,58cm con un rango de 1,5cm – 4,4cm. No se observó ningún paciente sin respuesta en el estudio. La mejora media con medición Vectra de la profundidad del foso o “puntuación de tersura” era de 2,9 mm o 60% (rango 1,1 mm – 6,3 mm)”.

Introduction Of A New Non-Invasive Device For Long-Term Localized Fat Reduction And Cellulite Improvement Using Controlled, Suction Coupled, Radiofrequency Heating And High Voltage Ultra-Short Electrical Pulses. *Journal of Clinical & Experimental Dermatology Research.*

“Un solo tratamiento facial completo con Fractora proporciona una mejora de más del 50% en múltiples indicadores del envejecimiento de la piel. Se observaba una mejora adicional en arrugas y tensado cutáneo en la revisión a los 6 meses en comparación con la revisión de los 3 meses, indicando un proceso a largo plazo de neocologénesis”.

A Prospective Study Analyzing The Application Of Radiofrequency Energy And High-voltage, Ultrashort Pulse Duration Electrical Fields On The Quantitative Reduction Of Adipose Tissue. *Journal of Cosmetic and Laser Therapy.*

**Para conocer todos los estudios clínicos  
visite la sección artículos clínicos en nuestra web**

**INMODE**

LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS MÁS DEMANDADOS EN UNA ÚNICA PLATAFORMA ¿ESTÁ SU CONSULTA PREPARADA PARA TENER VARIAS FUENTES DE INGRESO?

InMode le ofrece la plataforma más versátil del mercado para dar respuesta a todas las demandas de sus pacientes.

[WWW.INMODEM.D.ES](http://WWW.INMODEM.D.ES) | [infospain@inmodemd.com](mailto:infospain@inmodemd.com)