



LUXORA



THE INMODE ERA



# LUXORA

## **TECNOLOGÍA REFINADA CONTROL MEJORADO RESULTADOS EXCEPCIONALES**

La demanda de los pacientes por tratamientos de contorno facial continúa en máximos históricos, impulsada por cambios en el estilo de vida, el envejecimiento de la población y el aumento de pacientes con piel flácida y descolgada debido a la pérdida de peso asociada al uso creciente de medicamentos GLP-1. Los pacientes buscan tiempos de recuperación mínimos y resultados de aspecto natural en su deseo de lograr rasgos definidos y una apariencia más joven. Luxora es una solución facial integral, todo-en-uno, que aprovecha tecnologías sinérgicas para ofrecer contracción de tejidos blandos mediante radiofrecuencia fraccionada clínicamente probada. Su diseño multimodal ofrece una versatilidad inigualable, permitiendo a los profesionales tratar pacientes que pueden no ser candidatos ideales para procedimientos quirúrgicos tradicionales, pero que aun así desean resultados notables con un tiempo de inactividad mínimo.

Con Luxora, puedes realizar con total confianza tratamientos faciales personalizados y mínimamente invasivos directamente en tu consulta, sin necesidad de quirófano. Ofrece de forma segura y eficiente los resultados excepcionales que tus pacientes esperan en su proceso de transformación.

**Bienvenido a la Era InMode.**



*Presentamos*


# QUANTUMRF10

## CONTRACCIÓN PRECISA DEL TEJIDO BLANDO

QuantumRF 10 es un dispositivo de vanguardia, mínimamente invasivo, aprobado para su uso en procedimientos dermatológicos y quirúrgicos generales que requieren contracción de tejidos blandos. Basado en tecnología de radiofrecuencia clínicamente probada, permite tratar de forma precisa y segura áreas tales como: cuello, definición del óvalo facial o zonas corporales localizadas como los brazos, abdomen, flancos, rodillas, cara interna de muslos, etc. Sin dañar la dermis. La cánula de polímero, fácil de usar, administra energía de radiofrecuencia bipolar pulsada de forma controlada al plexo subdérmico, favoreciendo la contracción tisular con un menor tiempo de recuperación para el paciente. Diseñado para su uso en consulta, QuantumRF 10 ofrece resultados excepcionales sin necesidad de quirófano.

### *Especificaciones:*

Longitud de la cánula:	10 cm
Diámetro de la cánula:	2.2 mm
Potencia pico:	35 W
Ancho máximo de pulso:	250 ms

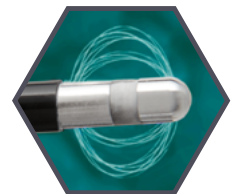

# FORMA

## TRATAMIENTO TÉRMICO DEL TEJIDO

Forma es una innovadora tecnología térmica que aplica energía de radiofrecuencia bipolar dirigida a las zonas dérmicas y subdérmicas, ofreciendo procedimientos no invasivos e indoloros. Los termistores RF autoajustables integrados en el aplicador, fácil de usar, miden la temperatura de la piel 1.000 veces por segundo, permitiendo que el tratamiento alcance temperaturas uniformes y óptimas de hasta 43 °C. El sistema inteligente de monitorización epidérmica de Forma, con retroalimentación continua, proporciona tratamientos cómodos, seguros y eficaces.

### *Especificaciones:*

Número de electrodos:	3
Tamaño del spot del aplicador:	2.2 cm x 2.5 cm
Corte de temperatura:	Ajustable por el operador hasta 43 °C
Frecuencia de salida:	1 MHz











# MORPHEUS8

with



## MORPHEUS8 *burst*



Morpheus8 Burst es una tecnología de radiofrecuencia fraccionada (FRF) destinada a aplicaciones dermatológicas que requieren contracción/coagulación de tejidos blandos o hemostasia. Equipado con las funcionalidades patentadas Burst y Scale, Morpheus8 Burst tiene la capacidad única, en un solo pulso, de desplegar automáticamente radiofrecuencia bipolar a múltiples profundidades del tejido blando, contrayendo tanto el tejido adiposo como el tejido dérmico. Este portafolio modular de tips, que incluye Prime de 12 micropines, Morpheus8 de 24 micropines y Resurfacing de 24 micropines, permite ofrecer resultados sin precedentes a los pacientes.

## MORPHEUS8 *burst deep*





Morpheus8 Burst Deep es una tecnología de radiofrecuencia fraccionada (FRF) destinada a aplicaciones dermatológicas que requieren contracción/coagulación de tejidos blandos o hemostasia. Con la capacidad de proporcionar tanto contracción profunda multinivel del tejido blando como contracción dérmica, Morpheus8 Burst Deep ofrece los niveles más profundos de deposición de energía RF dirigida disponibles, protegiendo el pigmento dérmico y permitiendo al mismo tiempo una mayor entrega de energía al FSN y al tejido adiposo. Equipado con las funcionalidades patentadas Burst y Scale, el gran tip superficial de 40 micropines de Morpheus8 Burst Deep despliega automáticamente energía de radiofrecuencia bipolar, en intervalos de milisegundos, a múltiples profundidades y niveles de energía en un solo pulso.

Especificaciones:	MORPHEUS8 DEEP	MORPHEUS8	RESURFACING	PRIME
Profundidad Burst:	Múltiples profundidades: 2-7 mm	Doble profundidad: 2-5 mm		
Profundidad Scale:	Múltiples profundidades: 2-7 mm	Doble profundidad: 2-5 mm		
Micropines:	40	24	24	12
Perfil de profundidad:	2mm - 7mm	1mm - 5mm	0.5mm	1mm - 4mm
Perfil térmico:	+1.0mm	+1.0mm	+0.25mm	+1.0mm

# ANTES Y DESPUÉS

## QUANTUMRF10

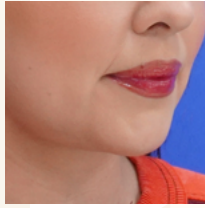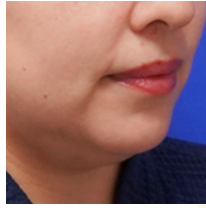


DR. E. DAYAN



DR. F. HAMADANI




DR. T. MANINGAS

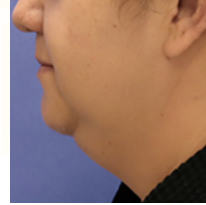

DR. E. DAYAN

## MORPHEUS8 *burst*

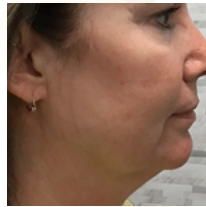



K. DONNAY DNP, FNP-C



J. MURPHY, RN



R. CHENIER, PA-C

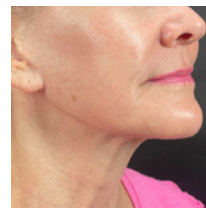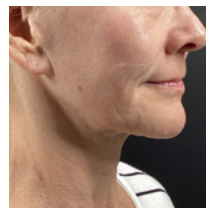

ESMÉ MEDSPA

## FORMA



DR. B. RIDENOUR



SHULZ BEAUTY & BODY



WWW.INMODEMD.ES