



LUXORA



THE INMODE ERA



LUXORA

TECNOLOGÍA REFINADA CONTROL MEJORADO RESULTADOS EXCEPCIONALES

La demanda de los pacientes por tratamientos de contorno facial continúa en máximos históricos, impulsada por cambios en el estilo de vida, el envejecimiento de la población y el aumento de pacientes con piel flácida y descolgada debido a la pérdida de peso asociada al uso creciente de medicamentos GLP-1. Los pacientes buscan tiempos de recuperación mínimos y resultados de aspecto natural en su deseo de lograr rasgos definidos y una apariencia más joven. Luxora es una solución facial integral, todo-en-uno, que aprovecha tecnologías sinérgicas para ofrecer contracción de tejidos blandos mediante radiofrecuencia fraccionada clínicamente probada. Su diseño multimodal ofrece una versatilidad inigualable, permitiendo a los profesionales tratar pacientes que pueden no ser candidatos ideales para procedimientos quirúrgicos tradicionales, pero que aun así desean resultados notables con un tiempo de inactividad mínimo.

Con Luxora, puedes realizar con total confianza tratamientos faciales personalizados y mínimamente invasivos directamente en tu consulta, sin necesidad de quirófano. Ofrece de forma segura y eficiente los resultados excepcionales que tus pacientes esperan en su proceso de transformación.

Bienvenido a la Era InMode.

Presentamos

QUANTUMRF10

CONTRACCIÓN PRECISA DEL TEJIDO BLANDO

QuantumRF 10 es un dispositivo de última generación y mínimamente invasivo, autorizado para su uso en procedimientos dermatológicos y de cirugía general que requieran la contracción de tejidos blandos.

Gracias a la tecnología de radiofrecuencia, de eficacia clínicamente demostrada, actúa de forma precisa y segura en zonas faciales delicadas a profundidades personalizables, sin dañar la dermis.

La cánula recubierta de polímero de QuantumRF 10, fácil de usar, aplica energía de radiofrecuencia (RF) bipolar pulsada y controlada al plexo subdérmico, lo que favorece la contracción de los tejidos y reduce el tiempo de recuperación del paciente.

Diseñado para su uso en la consulta, QuantumRF 10 ofrece resultados excepcionales sin necesidad de un quirófano.



Especificaciones:

Longitud de la cánula:		10 cm
Diámetro de la cánula:		2,2 mm
Potencia pico:		35 W
Ancho máximo de pulso:		250 ms





FACETITE *turbo*

FaceTite Turbo es una pieza de mano mínimamente invasiva, diseñada con una cánula rígida que proporciona un mayor control, precisión y seguridad en zonas de tejido pequeñas y delicadas.



FACETITE

FaceTite es una tecnología avanzada para el tratamiento de zonas corporales pequeñas. Gracias a la energía RFAL y a su diseño con una cánula no aspirante con punta de plástico, FaceTite permite a los profesionales médicos trabajar en el plano subdérmico de forma segura y eficaz.



ACCUTITE

AccuTite es el dispositivo de radiofrecuencia mínimamente invasivo más pequeño de la gama de productos RFAL. Es una tecnología avanzada para el tratamiento preciso de zonas delicadas. Sus sistemas de seguridad integrados incluyen la medición en tiempo real de la temperatura de la piel, la monitorización de la impedancia, la interrupción automática de la energía y avisos acústicos.





MORPHEUS8

con



MORPHEUS8 *burst*



Morpheus8 Burst es una tecnología de radiofrecuencia fraccionada (RFF) destinada a aplicaciones dermatológicas que requieren la contracción o coagulación de los tejidos blandos o la obtención de hemostasia. Gracias a sus funciones exclusivas Burst y Scale, Morpheus8 Burst posee la capacidad única de aplicar automáticamente, en un solo pulso, radiofrecuencia bipolar a diferentes niveles de profundidad de los tejidos blandos, logrando la contracción tanto del tejido adiposo como del tejido dérmico. Esta gama modular de puntas, que incluye Prime de 12 pines, Morpheus8 de 24 pines y Resurfacing de 24 pines, permite ofrecer resultados incomparables a sus pacientes.

Especificaciones:

	MORPHEUS8	RESURFACING	PRIME
Profundidad Burst:	Doble profundidad entre 2 mm y 5 mm		
Profundidad Scale:	Doble profundidad entre 2 mm y 5 mm		
Número de microagujas:	24	24	12
Perfil de profundidad:	1 mm - 5 mm	0,5 mm	1 mm - 4 mm
Perfil térmico:	+1,0 mm	+0,25 mm	+1,0 mm

FORMA

TRATAMIENTO TÉRMICO FACIAL

Forma es una innovadora tecnología térmica que aplica energía de radiofrecuencia bipolar de forma selectiva en las capas dérmicas y subdérmicas, permitiendo realizar procedimientos no invasivos e indoloros. Los termistores de radiofrecuencia con ajuste automático, integrados en una pieza de mano fácil de utilizar, miden la temperatura de la piel 1.000 veces por segundo, lo que permite alcanzar temperaturas uniformes y óptimas de hasta 43 °C. El sistema inteligente de monitorización epidérmica de Forma, con retroalimentación continua, proporciona a los pacientes tratamientos cómodos, seguros y eficaces.


Especificaciones:

Número de electrodos:	3
Tamaño del área de aplicación:	2,2 cm × 2,5 cm
Límite de temperatura:	Ajustable por el operador hasta 43 °C
Frecuencia de salida:	1 MH



ANTES Y DESPUÉS

QUANTUMRF10

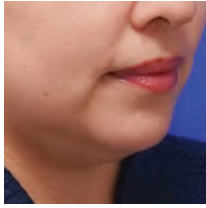


DR. E. DAYAN



DR. T. MANINGAS

FACETITE

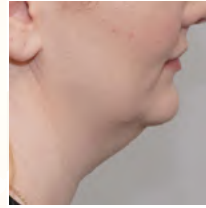


DR. M. TARAJKI



DR. R. MALHOTRA

MORPHEUS8 *burst*

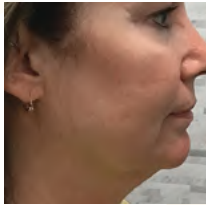

K. DONNAY DNP, FNP-C



R. CHENIER, PA-C

FACETITE *turbo*





DR. Z. WILLIS



DR. R. DIEPENBROCK

FORMA

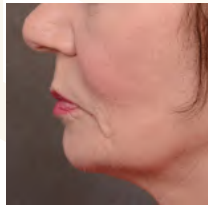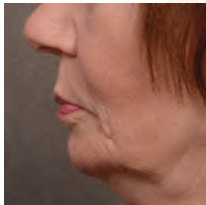

DR. B. RIDENOUR

ACCUTITE



DR. R. DIEPENBROCK



INMODE

WWW.INMODEMD.ES

VSBLUX1125