


BURST
MORPHEUS8 PRO



THE INMODE ERA

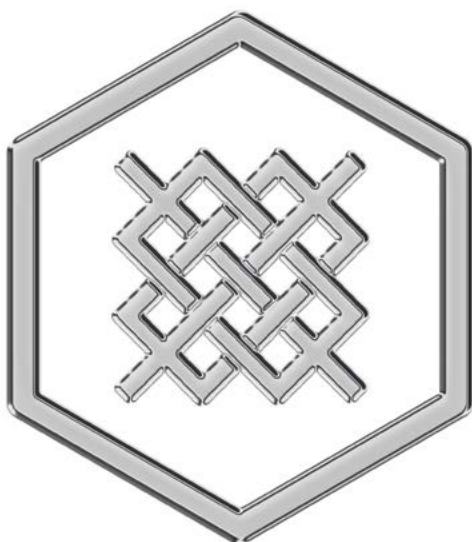

BURST MORPHEUS8 PRO



LA EVOLUCIÓN DE LA RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA

Morpheus8 PRO BURST reúne las tecnologías de radiofrecuencia fraccionada más avanzadas de InMode en una única plataforma especializada para la remodelación completa del rostro y el cuerpo.

Al combinar la precisión de Morpheus8 Burst, las capacidades de remodelación profunda de Morpheus8 Burst Deep y la tecnología térmica inteligente de Forma, **Morpheus8 PRO BURST** permite a los médicos personalizar los tratamientos en múltiples profundidades de tejido con una precisión, eficiencia y control excepcionales.

Desde el rejuvenecimiento superficial hasta la remodelación profunda de los tejidos y el tensado térmico no invasivo, los tratamientos pueden adaptarse a la anatomía y los objetivos estéticos únicos de cada paciente, todo ello desde una única plataforma versátil.

¿POR QUÉ MORPHEUS8 PRO BURST?

- Una plataforma específica para una remodelación completa mediante radiofrecuencia
- Tecnologías de radiofrecuencia térmica fraccionada y no invasiva
- Protocolos de tratamiento personalizados
- Versatilidad para rostro y cuerpo
- Múltiples profundidades de tratamiento
- Suministro inteligente de energía
- Tecnologías clínicamente probadas



UNA PLATAFORMA. TRES TECNOLOGÍAS.

MORPHEUS8 *burst*



Morpheus8 Burst es una tecnología de radiofrecuencia fraccionada (FRF) destinada a aplicaciones dermatológicas que requieren la contracción o coagulación de tejidos blandos o la hemostasia.

Equipado con las funciones patentadas «Burst» y «Scale», Morpheus8 Burst tiene la capacidad única de aplicar automáticamente, en un solo pulso, radiofrecuencia bipolar a distintos niveles de profundidad en los tejidos blandos, contrayendo tanto el tejido adiposo como el dérmico.

Esta gama modular de tips, que incluye Prime de 12 pines, Morpheus8 de 24 pines y Resurfacing de 24 pines, te permite ofrecer resultados inigualables a tus pacientes.

MORPHEUS8 *burst deep*



Morpheus8 Burst Deep es una tecnología de radiofrecuencia fraccionada (FRF) destinada a aplicaciones dermatológicas que requieren la contracción o coagulación de tejidos blandos, o la hemostasia.

Gracias a su capacidad para provocar una contracción profunda y multinivel de los tejidos blandos, Morpheus8 Burst Deep proporciona los niveles más profundos de deposición de energía de RF dirigida disponibles, protegiendo la epidermis al tiempo que permite aplicar una mayor cantidad de energía a la capa subepidérmica (FSN) y al tejido adiposo.

Equipado con las tecnologías patentadas Burst y Scale, la amplia punta superficial de 40 pines de Morpheus8 Burst Deep aplica automáticamente energía de radiofrecuencia bipolar, en intervalos de milisegundos, a profundidades de tratamiento y niveles de energía multinivel en un único pulso.

Especificaciones:	MORPHEUS8 DEEP	MORPHEUS8	RESURFACING	PRIME
Profundidad Burst:	múltiples profundidades entre 2mm - 7mm	doble profundidad entre 2mm - 5mm		
Profundidad Scale:	múltiples profundidades entre 2mm - 7mm	doble profundidad entre 2mm - 5mm		
Nº de Micropins:	40	24	24	12
Depth Profile:	2mm - 7mm	1mm - 5mm	0.5mm	1mm - 4mm
Heat Profile:	+1.0mm	+1.0mm	+0.25mm	+1.0mm



FORMA



Forma es una innovadora tecnología térmica que aplica energía de radiofrecuencia bipolar de forma selectiva en las capas dérmicas y subdérmicas. Equipada con un sistema inteligente de monitorización epidérmica, ofrece tratamientos no invasivos e indolores que son seguros y eficaces.

Los termistores de radiofrecuencia con ajuste automático integrados miden la temperatura de la piel 1.000 veces por segundo, lo que permite que el tratamiento alcance temperaturas óptimas clínicamente probadas.

<i>Especificaciones:</i>	FORMA
Nº de Electrodo:	3
Tamaño del Spot:	2.2cm x 2.5cm
Temperatura de corte:	Ajustable por el operador hasta 43°
Frecuencia de salida:	1 MHz

REMODELACIÓN COMPLETA

Morpheus8 PRO BURST permite a los médicos tratar todas las capas de tejido mediante una única plataforma integrada de radiofrecuencia.

Desde el rejuvenecimiento epidérmico hasta la remodelación de los tejidos profundos y el tensado térmico no invasivo, cada tecnología se complementa con las demás para facilitar estrategias de tratamiento personalizadas tanto en el rostro como en el cuerpo.

UNA PLATAFORMA. TRES TECNOLOGÍAS.



FORMA



MORPHEUS8

burst



MORPHEUS8

burst deep

LA PLATAFORMA COMPLETA DE RF FRACCIONADA

Desde hace más de dos décadas, InMode impulsa la innovación en el ámbito de la estética médica a través de tecnologías clínicamente probadas.

Respaldadas por más de 100 publicaciones clínicas revisadas por pares, las tecnologías de InMode siguen marcando la pauta en materia de innovación en el ámbito de la estética médica.

Este creciente conjunto de pruebas científicas respalda múltiples indicaciones y refleja nuestro compromiso constante con la excelencia clínica.

MORPHEUS8 PRO BURST

Ofrece a los médicos múltiples aplicadores y profundidades de tratamiento, lo que permite crear protocolos personalizados para el rejuvenecimiento cutáneo, la remodelación dérmica, la contracción de los tejidos profundos y el tensado cutáneo no invasivo.

Tanto si se tratan zonas faciales delicadas como áreas corporales más extensas, Morpheus8 PRO BURST se adapta a tu flujo de trabajo clínico con una versatilidad excepcional.

ANTES Y DESPUÉS

RESULTADOS CLÍNICOS DE UNA PLATAFORMA COMPLETA DE RF



REVITALYZCMD



K. KELLY, MPAS PA-C



D. SEA, ITEC



HL MED SPA



A. GRYUNSHPAN, FNP




DR. B. RICHLAND



DR. S. MULHOLLAND



DIAMOND AESTHETICS

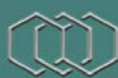

INMODE

WWW.INMODEMD.ES